

Thermo Scientific


Zamrażarki serii TSE -86°C



Wytrzymała konstrukcja do codziennego użytku:

- Zamrażarki szafowe, wykonane ze stali walcowanej na zimno, malowana farbą proszkową, odporną na odpryski i rdzę
- Izolacja poliuretanowa o grubości 12.7 cm, spieniana w miejscu
- *State-of-the-art* system chłodniczy poprawia kontrolę temperatury i zwiększa zdolność chłodzenia
- Dwa 2,5 cm porty dostępu umożliwiają korzystanie z niezależnych czujników temperatury
- Port wyrównania ciśnienia umożliwia łatwy dostęp do urządzenia po otwarciu drzwi
- Łatwy do wymiany zmywalny filtr zapewnia ochronę kondensera przed kurzem zwiększając wydajność chłodzenia

- Obsługa jedną ręką, kompatybilny z kłódką, ergonomiczny uchwyt drzwiowy, ze zintegrowanym zamkiem kluczowym (możliwe założenie kłódki)
- Trzy punktowa uszczelka
- RS 232, styk bezpotencjałowy w standardzie
- Zasilanie 230V/50Hz

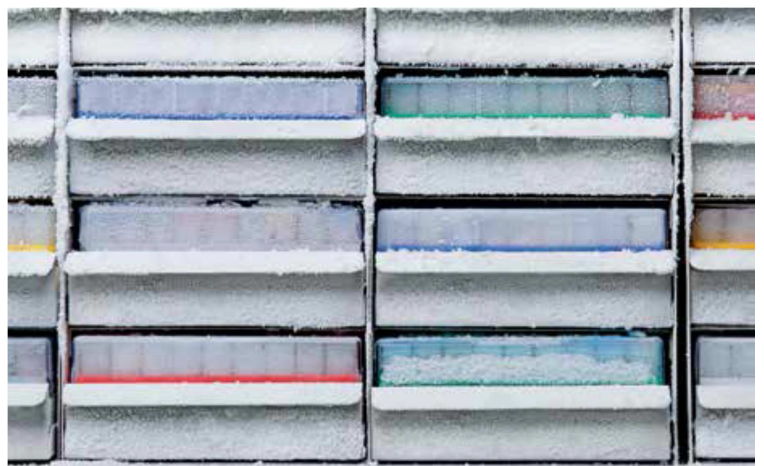


Wnętrze:

- Cztery wewnętrzne drzwi zmniejszają utratę chłodnego powietrza i poprawiają czas powrotu do zadanych parametrów po otwarciu drzwi
- Wnętrze galwanizowane (standard) lub stalowe (opcja)
- 3 stalowe półki (max załadunek 57 kg na 1 półkę), z możliwością zmiany ich położenia

Wszystkie ważne informacje w jednym miejscu:

- System kontroli i monitorowania gwarantują, że wszystkie istotne dla działania zamrażarki informacje są łatwo dostępne i czytelne
- Jasny i czytelny wyświetlacz LED, istotne alarmy z osobnymi diodami LED takimi jak: alarm otwartych drzwi, zaniku napięcia, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury
- System zarządzania energią z ochroną przeciwprzepięciową niskiego napięcia
- Opcjonalnie backup CO2 lub LN2, dla dodatkowej ochrony próbki w przypadku awarii zasilania lub awarii mechanicznej

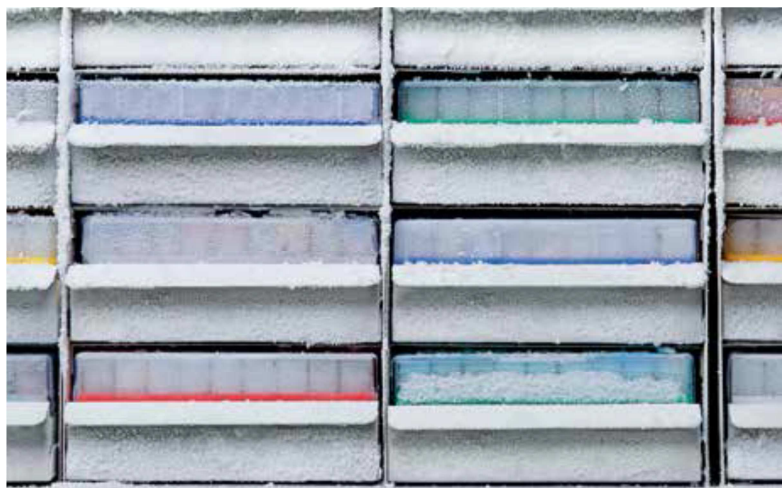

Specyfikacja zamrażarek TSE

Model	Zasilanie	Poj. (l)	Wymiary wew. (wys. x szer. x gł.) mm	Wymiary zew. (wys. x szer. x gł.) mm	Pobór mocy kWh/dzień	Powrót do -75°C*	Waga (kg)	Max poj. 2" pudełka	Jednorodność
TSE 240VGP	230V 50/60Hz	368	1308x584x490	1981x846x836	17	23 min	332	240	4,1 °C
TSE 320VGP	230V 50/60Hz	490	1308x584x643	1981x846x989	18	22 min	376	320	3,3 °C
TSE 400VGP	230V 50/60Hz	651	1308x777x643	1981x1036x989	19	33 min	399	400	4,5 °C
TSE 600VGP	230V 50/60Hz	793	1308x930x673	1981x1189x989	21	37 min	462	600	4,5 °C

*po 1 min. otwarciu drzwi

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis